

lumbopull 70/72

**L'intuition et l'ingénierie
contre le mal de dos.**

NOUVEAUTÉ



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better



... avec Lumbopull, c'est possible


Lumbopull permet d'atteindre tous ces objectifs car:

- 1 il **augmente** la pression intra-abdominale
- 2 il **favorise** la relaxation de la colonne vertébrale
- 3 il **crée** un obstacle naturel à la flexion, à la distension et à la rotation
- 4 il **permet** d'effectuer les mouvements nécessaires à l'accomplissement des activités quotidiennes

Contenir pour soutenir, tel est le secret...

La **région lombaire du rachis** est un point névralgique de la colonne vertébrale. Elle est souvent le siège de douleurs d'intensité variable. Qu'il s'agisse d'une **lombalgie passagère** ou de **suites postopératoires**, les conditions qui favorisent le mieux la réadaptation sont :

- 1 la réduction du poids qui pèse sur les vertèbres.
- 2 la posture correcte
- 3 la limitation du mouvement

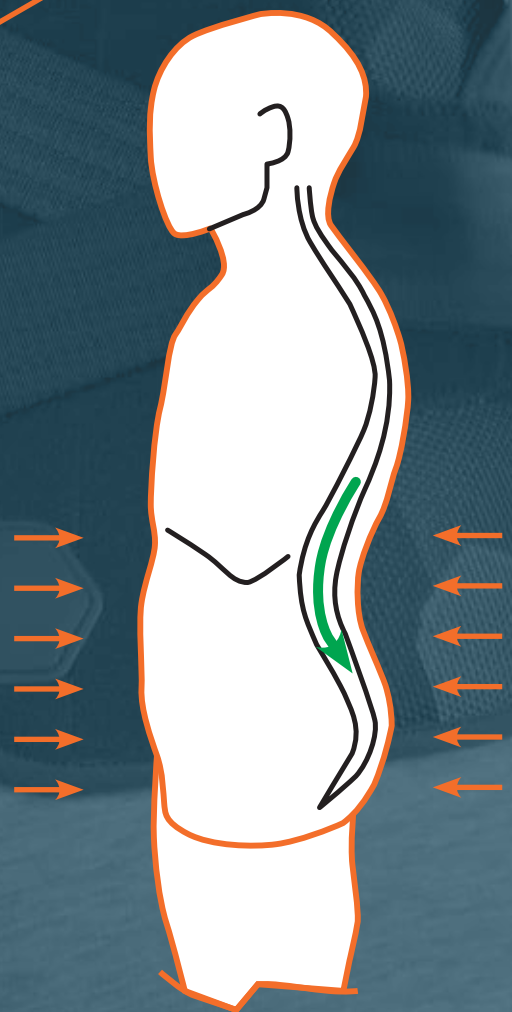

AVEC LUMBOPULL

lumbopull 70/72

L'orthèse qui quadruple la force de fermeture



Systeme exclusif de

Traction maximale avec un m
fermeture, en particulier pou

Tirants faciles
à tirer et fermeture
par Velcro®

Poulies en série

X1

X2

X

Renforts
Paravertébraux
Rigides

AJUSTEMENT OPTIMAL ET ADAPTABILITÉ

sans oublier le style grâce
à la **texture à hexagones**

LE DESIGN ANATOMIQUE

suit parfaitement les lignes
du corps et **facilite le port
de l'orthèse**



UN TISSU, DEUX FONCTIONS :

- **maintien** grâce à la matière extérieure en tissu technique « bloqué »
- **respirabilité** grâce au filet tridimensionnel interne

sangles et de poulies

Minimum d'effort pour faciliter la prise en main pour les patients affaiblis ou âgés



Sangle arrière passante pour permettre l'adaptation aux proportions taille - bassin

Poignées pour faciliter la prise lors de la fermeture



INSERT ÉLASTIQUE ARRIÈRE

en tissu souple, qui permet l'application par Velcro® des différentes options



PLAQUES LOMBAIRES BASSES

pour augmenter la rigidité de la zone arrière, thermoformable

Efficace et doté d'un extraordinaire profil bas

Dorsopull 74: l'orthèse devient une épaulière en quelques gestes simples

Dans les pathologies qui affectent également le **rachis thoracique**, l'orthèse peut devenir une épaulière, en lui simplement en lui ajoutant l'orthèse en option **Dorsopull**

- **BRETELLES RÉGLABLES EN LONGUEUR**

avec élastique arrière pour maximiser la force exercée


- **RÉALISÉ EN TISSU REMBOURRÉ**

- **SQUELETTE RIGIDE**

en alliage d'aluminium, **modelable** et **radiotransparent**.
Peut être retiré au besoin

- **BALEINES AUTO-MODELANTES**

pour un renforcement intérieur supplémentaire

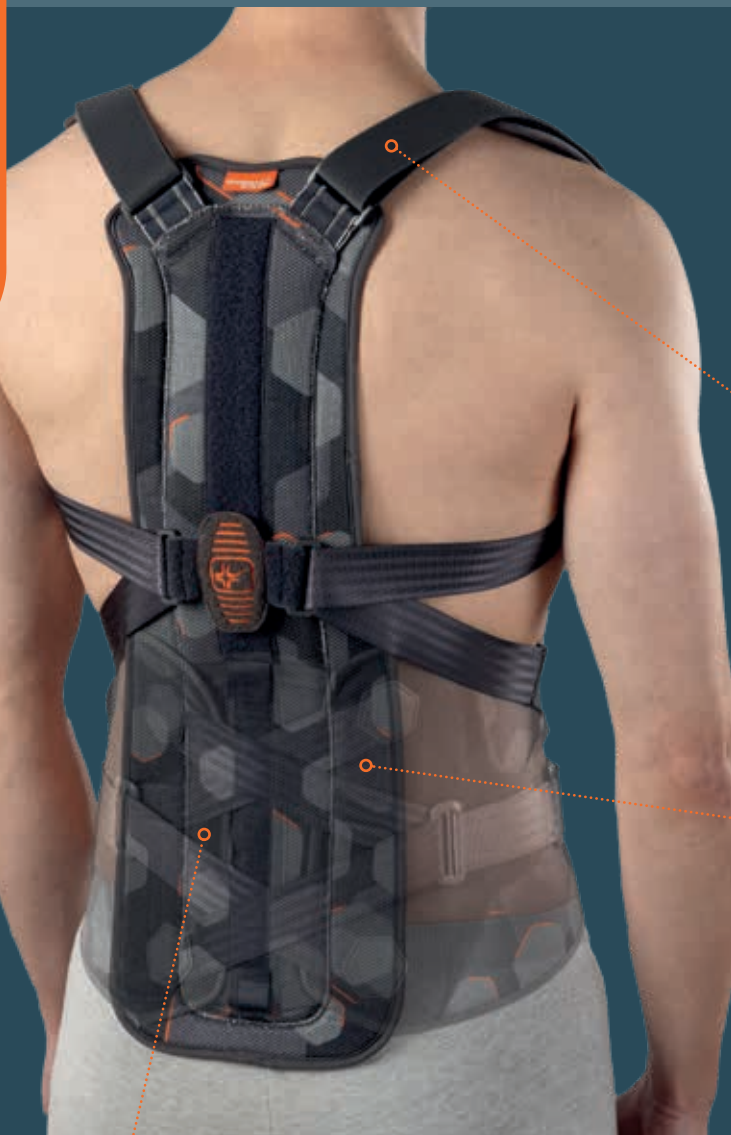

lumbopull 70 | REF.90070

Orthèse basse pour la stabilisation et la décharge du rachis lombaire, avec sangles facilitant la traction avec plaque rigide thermoformable

Code	REF.90070				
Mesure	S	M	L	XL	XXL
Circonf. bassin cm	70/85	85/100	100/115	115/130	130/145
Hauteur ant. cm	16	16	16	16	16
Hauteur post. cm	26	26	26	26	26

Couleur: gris

Option: REF. 70020 pelotte lombair haute, mesure 24x31

lumbopull 72 | REF.90072

Orthèse haute pour la stabilisation et la décharge du rachis lombaire, avec sangles facilitant la traction avec plaque rigide thermoformable

Code	REF.90072				
Mesure	S	M	L	XL	XXL
Circonf. bassin cm	70/85	85/100	100/115	115/130	130/145
Hauteur ant. cm	20	20	20	20	20
Hauteur post. cm	31	31	31	31	31

Couleur: gris

Option: REF. 70020 pelotte lombair haute, mesure 24x31

dorsopull 74 | REF. 90074

Dossier à bandoulières pour orthèse Lumbopull

Code	REF.90074			
Mesure	XS	S	M	L
Distance T1-L5 cm	35/41	41/47	47/54	54/61

Couleur: gris



www.orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. +49 (0) 7221 40 533 0 · Fax 0049 (0) 7221 40 533 20
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

OSUK Ltd
Units 47&50 North East BIC
Wearfield
Sunderland Enterprise Park East
Sunderland SR5 2TA
Tel +44 (0) 191 51 66 220
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 0362 18 51 200
info@roplusten.com · www.roplusten.com



REF. 90070



REF. 90072



REF. 90074



REF. 70020 pelotte lombair haute

Indications**LUMBOPULL 70/72**

- Lomalgies
- Lombosciatalgies et lombocruralgies
- Spondylarthrose et discopathies lombaires
- Traumatismes légers de la colonne lombosacrée et contractures paravertébrales lombaires
- Cours postopératoire
- Résultats de tassements des vertèbres lombaires
- Traitement de la fracture des apophyses transverses
- Seulement Lumbopull72: Scoliose dégénérative lombaire
- Seulement Lumbopull72: Spondylose avec ou sans lystèse vertébrale

DORSOPULL 74

- Dorsalgies sur base arthrosique ou découlant de cyphose
- Suites de fractures des vertèbres dorsales et/ou lombaires hautes
- Suites de tassements des vertèbres dorsales dus à l'ostéoporose ou la métastase osseuse

Contre-indications

- Aucune connue à ce jour



PATENTED



EASY PULLING



BREATHABLE



ANATOMICAL FIT



3D FABRIC



SINGLE PATIENT MULTIPLE USE



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better