

lumbopull 70/72

Mit Intuition und Ingenieurskunst gegen Rückenschmerzen.

HMV: 23.14.02.0015

NEUHEIT



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**


Take care feel better

Eine wirkungsvolle Unterstützung, das ist der Schlüssel ...

Der **Bereich der Lendenwirbelsäule** ist ein neuralgischer Punkt der Wirbelsäule, an dem häufig Schmerzen unterschiedlicher Intensität auftreten.

Egal, ob es sich um eine **vorübergehende Lumbalgie** oder um **postoperative Beschwerden** handelt, die Faktoren, die eine Genesung am besten begünstigen, sind:

- 1 das Reduzieren der Belastung, welche auf die Wirbel einwirkt
- 2 eine korrekte Körperhaltung
- 3 das vorübergehende Einschränken der Bewegung

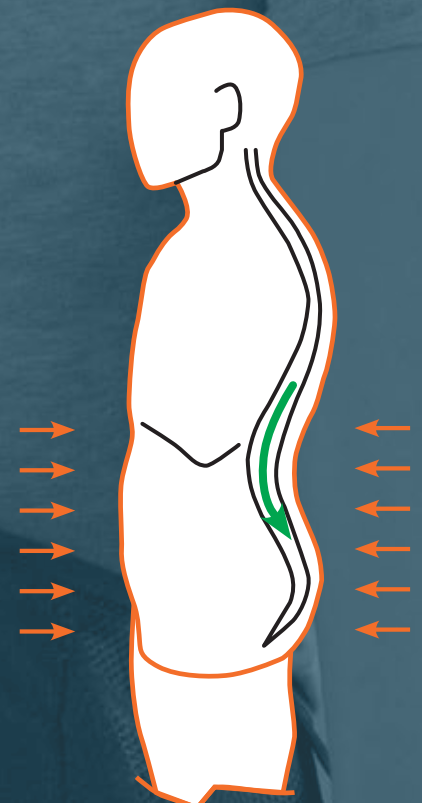

MIT LUMBOPULL

...mit Lumbopull ist alles möglich

Lumbopull unterstützt bei all Ihren Zielen, weil die Orthese:

- 1 den endoabdominalen Druck **steigert**
- 2 das Strecken der Wirbelsäule **begünstigt**
- 3 eine natürliche Einschränkung der Beuge-, Streck- und Drehbewegungen **bildet**
- 4 die für den Alltag notwendigen Bewegungen **zulässt**

lumbopull 70/72

**Gurtsystem, bei dem sich
die Kraft durch einfaches
Ziehen vervierfacht**





X1

X2

X

EXKLUSIVES RIEMEN- UND ZUGGURT-SYSTEM

maximale Zugkraft bei minimalem Kraftaufwand, um das Schließen zu erleichtern, auch für geschwächte oder ältere Patienten durch die neuen Griffe

ANATOMISCHES DESIGN

folgt perfekt den Konturen des Körpers und macht das Anlegen der Orthese besonders einfach

AUSGEZEICHNETE PASSFORM UND ANPASSBARKEIT

mit stilvollem Design dank des Hexagon-Gewebes

STARRE PARAVERTEBRALE VERSTÄRKUNGEN

aus polymerem Material zur Gewährleistung von **Stabilität und Steifigkeit**, thermoverformbar



EIN MATERIAL, ZWEI FUNKTIONEN:

- **Optimales Stabilisieren** durch das äußere, formbeständige Funktionsgewebe
- **Atmungsaktivität** dank des dreidimensionalen Mesh-Gewebes auf der Innenseite

4



Schlaufen für die
Schultergurte der
Rückenmoduls

Griffschlaufen
zur leichteren
Handhabung beim
Schließen

Durchgehender hinterer
Gurt zum optimalen
Anpassen an Taille und
Becken

ELASTISCHER EINSATZ AUF DER RÜCKSEITE

aus weichem Gewebe, das
ein Befestigen von optionalem
Zubehör mittels Klettband
ermöglicht



OPTIONALE HOHE UND NIEDRIGE LUMBALPELOTEN

zum Erhöhen der Stützfunktion
im Rückenbereich



Wirkungsvoll
und mit einem
ultraflachen Profil

Dorsopull 74: vom Korsett zur Orthese mit Schultergurt in nur wenigen Handgriffen

Bei Krankheitsbildern, die auch den Bereich der **Brustwirbelsäule** betreffen, kann das Korsett durch die einfache Kombination mit dem optionalen Rückenmodul **Dorsopull** zur Orthese mit Schultergurten werden

- **LÄNGENVERSTELLBARE SCHULTERGURTE**

mit elastischem Umlenkband auf der Rückseite zum Maximieren der ausgeübten Zugkraft

- **AUS GEPOLSTERTEM GEWEBE GEFERTIGT**

- **STARRER RAHMEN**

aus einer modellierbaren und röntgenstrahlendurchlässigen Aluminiumlegierung. Bei Bedarf herausnehmbar

- **MODELLIERBARE VERSTÄRKUNGSSTÄBE**

für eine zusätzliche Verstärkung innen



lumbopull 70

REF.90070 | HMV: 23.14.02.0015

Lendenwirbelsäulen-Stütz-Orthese zur Stabilisation, statischen Korrektur und Entlastung, abrüstbar

lumbopull 70 FORTE

REF.90070F | HMV: 23.14.02.0014

LWS-Überbrückungs-Orthese zur Stabilisation, statischen Korrektur und Entlastung, abrüstbar (LSO), (inkl. PAD20)

Artikelnummer	REF.90070 90070F				
Größe	S	M	L	XL	XXL
Beckenumfang in cm	70/85	85/100	100/115	115/130	130/145
Höhe vorn in cm	16	16	16	16	16
Höhe hinten in cm	26	26	26	26	26

Farbe: Grau

REF. 70010 Niedrige Lumbalpelotte, Größe 24x23

REF. 70020 Hohe Lumbalpelotte, Größe 24x31



REF. 90070



REF. 90072



REF. 90074



REF. 70010 niedrige Lumbalpelotte
REF. 70020 hohe Lumbalpelotte

lumbopull 72

REF.90072 | HMV: 23.14.02.0015

Lendenwirbelsäulen-Stütz-Orthese zur Stabilisation, statischen Korrektur und Entlastung, abrüstbar

lumbopull 72 FORTE

REF.90072F | HMV: 23.14.02.0014

LWS-Überbrückungs-Orthese zur Stabilisation, statischen Korrektur und Entlastung, abrüstbar (LSO), (inkl. PAD20)

Artikelnummer	REF.90072 90072F				
Größe	S	M	L	XL	XXL
Beckenumfang in cm	70/85	85/100	100/115	115/130	130/145
Höhe vorn in cm	20	20	20	20	20
Höhe hinten in cm	31	31	31	31	31

Farbe: Grau

REF. 70010 Niedrige Lumbalpelotte, Größe 24x23

REF. 70020 Hohe Lumbalpelotte, Größe 24x31

Indikationen

LUMBOPULL 70/72

- Lumbalgie
- Lumboischialgie und Lumbocruralgie
- Spondylarthrose und lumbale Diskopathien
- Leichtes Trauma der lumbosakralen Wirbelsäule und paravertebrale lumbale Muskelkontraktur
- Postoperative Behandlung
- Folgebeschwerden von Sinterungen der Lendenwirbelsäule
- Behandlung von Brüchen der Querfortsätze
- Spondylose mit oder ohne Lysis der Wirbelsäule
- Nur Lumbopull72: Degenerative lumbale Skoliose
- Nur Lumbopull72: Spondylolyse mit oder ohne Wirbelgleiten

Indikationen

LUMBOPULL 70/72 Forte

- Schwere Lumboischialgie mit muskulären Ausfällen bei erheblichen Bandscheibenprotrusionen/ Prolaps, ohne absolute OP-Indikation
- Schweres radikuläres, pseudoradikuläres Lumbalsyndrom (konservativ therapieresistent)
- Spondylolisthese Grad II mit rezidivierenden Lumboischialgien
- Schwere lumbale Deformität bei facettensyndrom/ Arthrose z.B. BS-OP ohne verbliebene Parese bei ausgeräumter BS
- Spinalkanaldekompensation
- Spinalkanalstenose mit kurzer Gehstrecke ohne wesentliche Paresen
- Wirbelfrakturen posttraumatisch geringen Ausmaßes

DORSOPULL 74

- Dorsalgie aufgrund von Arthrose oder Kyphose
- Folgebeschwerden nach Brüchen im oberen Rückenwirbel- und/oder Lendenwirbelbereich
- Folgebeschwerden nach Rückenwirbelsinterungen aufgrund von Osteoporose oder Metastasen

Kontraindikationen

- Derzeit keine bekannt

dorsopull 74

REF.90074 | HMV: 23.15.02.1003

Rückenmodul für die Lumbopull - Wirbelsäulen-Orthese zur Entlastung und statischen Korrektur der Brust- und Lendenwirbelsäule in Sagittalebene, abrüstbar (TLSO)

Artikelnummer	REF.90074			
Größe	XS	S	M	L
Abstand T1-L5 cm	35/41	41/47	47/54	54/61

Farbe: Grau



PATENTED



EASY PULLING



BREATHABLE



ANATOMICAL FIT



3D FABRIC



SINGLE PATIENT MULTIPLE USE

lumbopull 70/72



www.orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG

Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



ORTHOERVICE DEUTSCHLAND GmbH

Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. +49 (0) 7221 40 533 0 · Fax 0049 (0) 7221 40 533 20
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOERVICE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

OSUK Ltd

Units 47&50 North East BIC
Wearfield
Sunderland Enterprise Park East
Sunderland SR5 2TA
Tel +44 (0) 191 51 66 220
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

RO+TEN S.r.l.

Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 0362 18 51 200
info@roplusten.com · www.roplusten.com



**ORTHOERVICE
RO+TEN**

Take care feel better