

lumbopull 70/72

**L'intuito e l'ingegneria
a supporto della schiena**

NOVITÀ




**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better

Contenere per sostenere, questo è il segreto...

Che si tratti di un decorso post operatorio, di una patologia acuta o cronica, **LumboPull** favorisce il recupero grazie a:

- 1 aumento della pressione endoaddominale**, che riduce il peso che grava sulle vertebre e porta a una postura più corretta
- 2 limitazione della flessione-estensione**

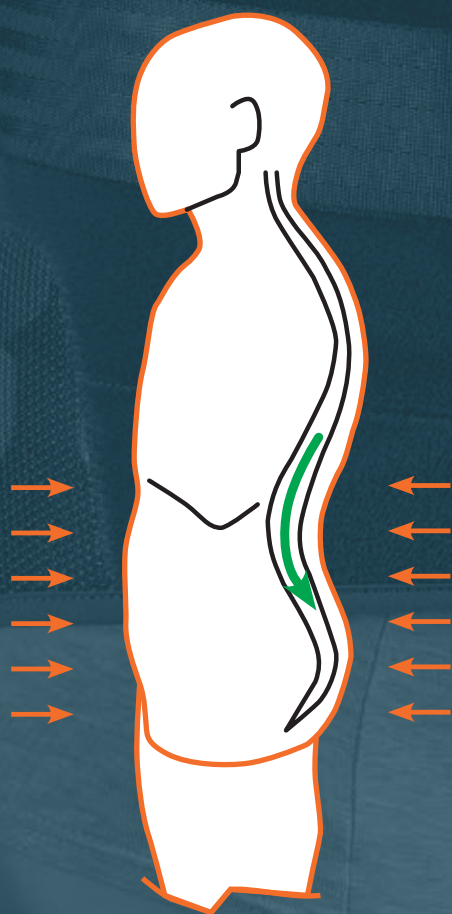

CON LUMBOPULL



BUSTO + PELOTTA RIGIDA =
trattamento delle **patologie acute**



SOLO BUSTO =
trattamento delle **patologie croniche**

lumbopull 70/72

Il busto che **quadruplica** la forza di chiusura



Un sistema esclusivo

Massimizza la forza di trazione e agevolare la chiusura anche



OTTIMA VESTIBILITÀ E ADATTABILITÀ

con un occhio
anche al design

DISEGNO ANATOMICO

segue perfettamente
le linee del corpo e rende
il tutore **facile da
indossare**



UN TESSUTO, DUE FUNZIONI:

- **contenimento** attraverso il materiale esterno in tessuto tecnico "bloccato"
- **traspirabilità** grazie alla rete tridimensionale interna

di cinghie e carrucole

ne per aumentare il sostegno
nei pazienti indeboliti o anziani



4

Cinghia posteriore
passante per garantire
l'adattamento alle
proporzioni vita-bacino

Maniglie per
facilitare la presa
in fase di chiusura



INSERTO ELASTICO POSTERIORE

in morbido tessuto, permette
l'applicazione a Velcro® dei
diversi optional



PELOTTA RIGIDA BASSA

in materiale polimerico
per garantire **stabilità** e
rigidità, termoformabile

Efficace e con
uno straordinario
basso profilo

lumbopull 70 | REF.90070

Busto ortopedico basso con tiranti a trazione facilitata per la stabilizzazione e lo scarico del rachide lombare, con pelotta rigida termoformabile

Codice	REF.90070				
Taglia	S	M	L	XL	XXL
Circonferenza bacino cm	70/85	85/100	100/115	115/130	130/145
Altezza anteriore cm	16	16	16	16	16
Altezza posteriore cm	26	26	26	26	26

Colore: grigio scuro

Option: REF.70020 pelotta rigida alta

lumbopull 72 | REF.90072

Busto ortopedico alto con tiranti a trazione facilitata per la stabilizzazione e lo scarico del rachide lombare, con pelotta rigida termoformabile

Codice	REF.90072				
Taglia	S	M	L	XL	XXL
Circonferenza bacino cm	70/85	85/100	100/115	115/130	130/145
Altezza anteriore cm	20	20	20	20	20
Altezza posteriore cm	31	31	31	31	31

Colore: grigio scuro

Option: REF.70020 pelotta rigida alta



REF. 90070



REF. 90072



Option: REF. 90074 Schienale per spallaccio DorsoPull 74



Option: REF. 70020 pelotta rigida alta

Indicazioni**LUMBOPULL 70/72**

- Lombalgie
- Lombosciatalgie e lombocuralgie
- Spondiloartrosi e discopatie lombari
- Traumi lievi della colonna lombosacrale e contratture paravertebrali lombari
- Decorso postoperatorio
- Esiti di cedimenti vertebrali lombari
- Trattamento della frattura dei processi trasversi.
- Solo Lumbopull72: Scoliosi degenerativa lombare
- Solo Lumbopull72: Spondilolisi con o senza listesi vertebrale

Controindicazioni

- Al momento nessuna conosciuta



www.orthoservice.com



PATENTED



EASY PULLING



BREATHABLE



ANATOMICAL FIT



3D FABRIC



SINGLE PATIENT MULTIPLE USE

Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. +49 (0) 7221 40 533 0 · Fax 0049 (0) 7221 40 533 20
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

OSUK Ltd
Units 47&50 North East BIC
Wearfield
Sunderland Enterprise Park East
Sunderland SR5 2TA
Tel +44 (0) 191 51 66 220
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 0362 18 51 200
info@roplusten.com · www.roplusten.com



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better