

lumbopull 70/72

**Intuicja i inżynieria
w walce z bólem
pleców.**

NOWOŚĆ



**ORTHOERVICE
RO+TEN**

Take care feel better



Z Lumbopull możesz ...


Lumbopull spełnia założone cele,
ponieważ:

- 1** **zwiększa** ciśnienie śródbrzuszne
- 2** **wspomaga** dekompresję (odciążenie) kręgosłupa
- 3** **tworzy** naturalną przeszkodę dla niepożądanych ruchów zgięcia, wyprostu i rotacji
- 4** **pozwała zachować** ruchy niezbędne do wykonywania codziennych czynności

Objąć, żeby wspierać - taki jest sekret...

Odcinek lędźwiowy kręgosłupa to newralgiczny punkt kręgosłupa, często miejsce bólu o różnym nasileniu. Niezależnie od tego, czy jest to przejściowy **ból dolnej części pleców**, czy **ból pooperacyjny**, elementy, które najlepiej sprzyjają rekonwalescencji, to:

- 1 Redukcja obciążenia kręgow
- 2 Prawidłowa postawa
- 3 Ograniczenie ruchomości

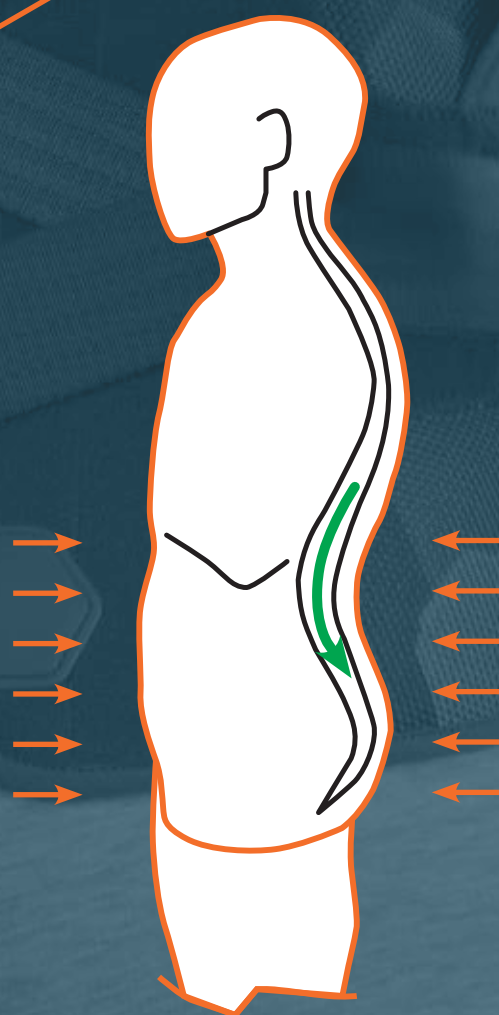

Z LUMBOPULL

lumbopull 70/72

Gorset, który czterokrotnie zwiększa siłę wsparcia



Ekskluzywny system

maksymalna korekcja przy m
zamykanie nawet u osłabiony

Łatwe w obsłudze
taśmy z zapięciem na
rzep Velcro®

Szeregowe klamry

X1

X2

X

Sztywne
wzmocnienia
Przykręgosłupowe

DOSKONAŁA ESTETYKA I DOPASOWANIE

dbałość o styl
i unikalne, nowoczesne
wzornictwo

ANATOMICZNY DESIGN

idealnie dopasowuje
się do obrysów ciała
i sprawia, że gorset jest
łatwy w zakładaniu



JEDEN MATERIAŁ, DWIE FUNKCJE:

- **estetyka** dzięki zewnętrznej, technicznej tkaninie "blocked"
- **przewiewność** dzięki wewnętrznej, trójwymiarowej siatce

m pasków i klamr:

minimalnym wysiłku, ułatwia
wych lub starszych pacjentów



4
Tylne taśmy stabilizacyjne zapewniają dopasowanie do proporcji talia-miednica



PODUSZKA LĘDŹWIOWA

Wykonana z materiału polimerowego zapewniającego stabilność i sztywność, termoformowalna



TYLNA, ELASTYCZNA WKŁADKA

z miękkiej tkaniny umożliwia mocowanie różnych opcjonalnych akcesoriów za pomocą rzepów Velcro®

Efektywny,
o wyjątkowo
niskim profilu

Dorsopull 74: gorset staje się modelem TLSO w zaledwie kilku krokach

W przypadku schorzeń, które wpływają również na **odcinek piersiowy** kręgosłupa, gorset Lumbopull można rozbudować i zmodyfikować zakres stabilizacji poprzez połączenie z modułem **Dorsopull**

- **TAŚMY NARAMIENNE Z REGULACJĄ DŁUGOŚCI**

z elastycznym tylnym panelem dla optymalizacji dopasowania i siły korekcji

- **WYKONANY Z DWUWARSTWOWEJ WYŚCIEŁANEJ TKANINY**

- **SZTYWNA RAMA**

wykonana ze stopu aluminium, **formowalna i przepuszczalna dla promieni rentgenowskich.**

Można ją zdemontować w razie potrzeby

- **SAMOFORMUJĄCE SIĘ SZYNY**

dla dodatkowego wzmocnienia wewnętrznego



lumbopull 70 | REF.90070

Gorset stabilizujący lędźwiowo-krzyżowy z taśmowym systemem trakcji, sztywny, termoformowalny

Kod	REF.90070				
Rozmiar	S	M	L	XL	XXL
Obwód miednicy w cm	70/85	85/100	100/115	115/130	130/145
Wysokość z przodu w cm	16	16	16	16	16
Wysokość z tyłu w cm	26	26	26	26	26

Kolor: ciemnoszary

Option: REF. 70020 duża poduszka lędźwiowa, 24x31 cm



REF. 90070



REF. 90072

lumbopull 72 | REF.90072

Gorset stabilizujący lędźwiowo-krzyżowy z taśmowym systemem trakcji (wysoki), sztywny, termoformowalny

Kod	REF.90072				
Rozmiar	S	M	L	XL	XXL
Obwód miednicy w cm	70/85	85/100	100/115	115/130	130/145
Wysokość z przodu w cm	20	20	20	20	20
Wysokość z tyłu w cm	31	31	31	31	31

Kolor: ciemnoszary

Option: REF. 70020 duża poduszka lędźwiowa, 24x31 cm



REF. 90074

Option: REF. 70020
duża poduszka lędźwiowa**dorsopull 74 | REF. 90074**

Wysoka orteza tułowia do łączenia z Lumbopull

Kod	REF.90074			
Rozmiar	XS	S	M	L
Odległość T1-L5 w cm	35/41	41/47	47/54	54/61

Kolor: ciemnoszary

Wskazania**LUMBOPULL 70/72**

- Lumbalgia
- Rwa kulszowa i rwa udowa
- Spondyloartroza i dyskopatie lędźwiowe
- Niewielkie urazy kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego i przykurcze mięśni przykręgosłupowych odcinka lędźwiowego
- Rehabilitacja pooperacyjna
- Następstwa stabilnych złamań kompresyjnych kręgów lędźwiowych
- Leczenie złamań wyrostków poprzecznych
- Dotyczy wyłącznie Lumbopull72: Degeneracyjna skolioza lędźwiowa
- Dotyczy wyłącznie Lumbopull72: Spondyloliza z lub bez listy kręgów

DORSOPULL 74

- Ból pleców spowodowany artrozą lub kifotyzacją odcinka piersiowego
- Następstwa złamań kręgów piersiowych i / lub górnych kręgów lędźwiowych
- Następstwa stabilnych złamań kompresyjnych kręgosłupa piersiowego spowodowanych osteoporozą lub przerzutami (metastazami)

Przeciwwskazania

- Na chwilę obecną brak znanych przeciwwskazań



www.orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. +49 (0) 7221 40 533 0 · Fax 0049 (0) 7221 40 533 20
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

OSUK Ltd
Units 47&50 North East BIC
Wearfield
Sunderland Enterprise Park East
Sunderland SR5 2TA
Tel +44 (0) 191 51 66 220
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 0362 18 51 200
info@roplusten.com · www.roplusten.com



PATENTED



EASY PULLING



BREATHABLE



ANATOMICAL FIT



3D FABRIC



SINGLE PATIENT MULTIPLE USE



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better